


SDM 1 PHOTOMETER ZUR SAMENDICHTEBEURTEILUNG

Schnell, genau und einfach in der Anwendung

Das SDM 1 ist ein kompaktes, sehr genaues Photometer das speziell für die Analyse der Spermadichte entwickelt wurde. Es kann für Rind, Schwein, Pferd Hund und kleine Wiederkäuer kalibriert werden. Die Reinigung des Gerätes ist sehr einfach, der Wartungsaufwand minimal. Die Samen Konzentration wird in Millionen Spermien/ml angezeigt.

Ihr Nutzen

- Keine Verdünnung von Samenproben erforderlich
- LED Lichtquelle sorgt für eine stabile Leistung und mindert die Häufigkeit der erforderlichen Neukalibrierungen
- Die Küvette wird sicher in der korrekten Position fixiert
- Der Anwender aktiviert die Analyse, wenn die Küvette richtig positioniert ist
- Jede Probe wird automatisch mehrmals gelesen, die Ergebnisse werden gemittelt um ein exaktes Endergebnis zu liefern
- Minimaler Aufwand für Reinigung und Wartung. Einfach den Deckel der Küvettenhalterung anheben und abwischen
- Die Kalibrierung wird automatisch bei jedem Messvorgang durchgeführt
- Software Updates erfolgen durch Schnittstellenabindung

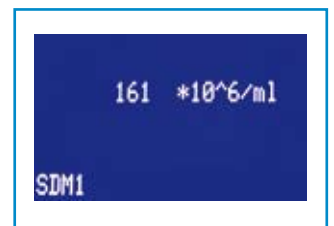

Ergebnis in Millionen Spermien / ml



Neue Microküvette zur sicheren Fixierung

SDM 1 Schwein	REF. : 12300/0100
SDM 1 Pferd	REF. : 12300/0101
SDM 1 Rind	REF. : 12300/0102
SDM 1 Hund	REF. : 12300/0103
SDM 1 Schaf/Ziege	REF. : 12300/0104
Microküvette für SDM 1, 100/Packung	REF. : 12300/1111

Technische Merkmale

- Gewicht: 1,5 kg (netto)
- Maße: ca. 25 x 13 x 5,5 cm
- Display: LED
- Anschluss: 110 - 230 V / 50 - 60 Hz und Batterie